




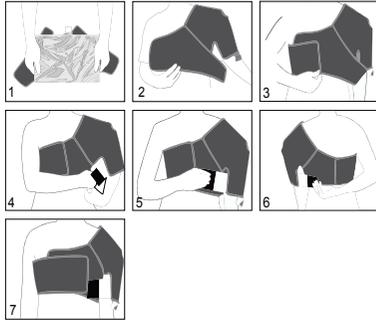


Enveloppes


Épaule

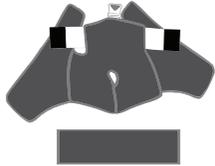

Genou

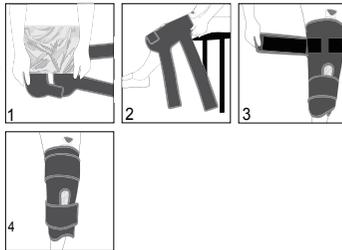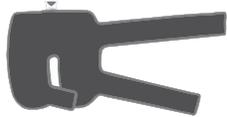

Cheville

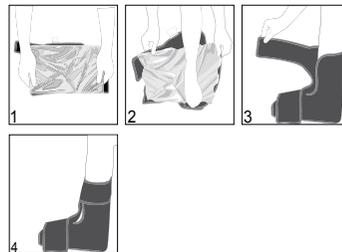

Résolution de problèmes

Bruit fort au début d'un programme	<ol style="list-style-type: none"> Après 2 à 3 minutes, le bruit se réduit automatiquement (amorçage de la pompe). Si le bruit persiste, arrêter et débrancher immédiatement le contrôleur, puis contacter le fournisseur.
Le contrôleur ne s'allume pas	<ol style="list-style-type: none"> Vérifier que la fiche d'alimentation est correctement insérée dans la prise secteur. Vérifier que la fiche alimentation est correctement insérée dans le contrôleur.
Il y a de l'eau sur la surface de l'enveloppe	<ol style="list-style-type: none"> Vérifier s'il s'agit d'eau condensée ou d'une fuite. Si l'enveloppe fuit, arrêter et débrancher immédiatement le contrôleur, puis contacter le fournisseur.



Caractéristiques techniques

Alimentation Courant Alternatif : 100-240V, 50/60Hz
 Sortie Courant Continu : 12V/2A
 Niveau de pression : Conférer au tableau dans manuel d'utilisation
 Niveau de température : 0°C-25°C
 Niveau sonore : moins de 50 décibels
 Poids : 2 kg
 Capacité : maximum 3,6L

Nous contacter

PROCUST BY SUD ORTHOPEDIE
 849 RUE FAVRE DE SAINT CASTOR
 34080 MONTPELLIER
 ☎ 04.67.04.24.15
 ✉ contact@procust.fr

Rev 03/05/2021



Manuel d'utilisation



Précautions d'utilisation

1. Lire attentivement les instructions avant toute utilisation.
2. Ne pas poser ni faire tomber de poids trop lourds sur le contrôleur.
3. Ne pas démonter le contrôleur.
4. N'utiliser qu'exclusivement les éléments originaux (tuyau, enveloppes et adaptateur secteur).
5. Lors de l'utilisation de ce dispositif, placer un tissu isolant entre l'enveloppe et la peau.
6. Ne pas réutiliser les composants électriques lorsqu'ils sont endommagés ou lorsqu'ils présentent des fuites.
7. Ne pas laisser les enfants ou les personnes âgées inaptes utiliser ce dispositif.
8. Conserver ces instructions. En cas de panne, contacter le distributeur.


Composition

Contrôleur IMPULSE CRYO NOV	
ACCESSOIRES Tuyau à connecteurs et Embout purgeur	
Adaptateur secteur	
Enveloppes	
Sac de transport	
Manuel d'utilisation	




Mode d'emploi


- a. Appuyer sur le bouton d'ouverture du réservoir (1) puis retirer le couvercle. Ajouter de l'eau (2) au moins jusqu'à la limite « Water Min », puis de la glace (3) sans dépasser la limite « Ice Max ». Ensuite, refermer le couvercle (4).

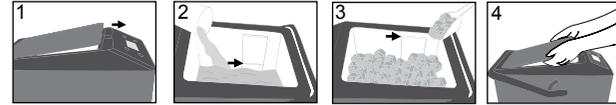

- b. Placer un jersey à l'intérieur de l'enveloppe(5), puis positionner celle-ci sur le membre à traiter (6). Ensuite, serrer les sangles (7, 8).

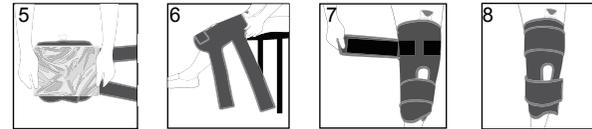

- c. Relier le tuyau à connecteurs au contrôleur (9) puis à l'enveloppe (10). Connecter ensuite l'adaptateur secteur au contrôleur (12), puis brancher (13). Une fois le montage finalisé (11), commencer la séance.

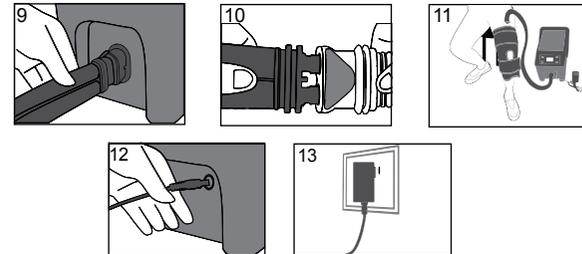

- d. Appuyer sur le bouton environ 3 à 5 secondes, l'écran devrait s'allumer et afficher le message « Welcome » (Bienvenue).


- e. Appuyer sur le bouton ou pour choisir le programme et la pression.

Mode	Pression Press	Time on	Time off	Remarque
1	Basse Low	20	20	Mode : Le numéro du mode correspond à l'un des 9 programmes pré-enregistrés.
2		40	40	
3		60	60	
4	Moyenne Mid	20	20	Pression : Correspond à la pression choisie.
5		40	40	
6		60	60	
7	Élevée High	20	20	Time on/time off : Correspond à la durée du cycle de compression en alternance avec la durée du cycle de pause.
8		40	40	
9		60	60	




- f. Appuyer sur le bouton pour démarrer ou arrêter le contrôleur. Pendant une séance, appuyer sur ce bouton pour mettre en pause.


- g. Appuyer sur la touche pendant environ 3 à 5 secondes pour éteindre le contrôleur.

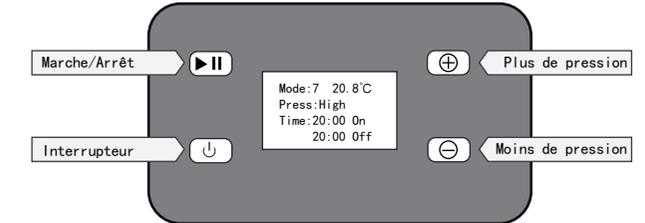

- h. Après utilisation, soulever l'enveloppe pour évacuer l'eau en pressant (14), puis essuyer l'enveloppe. Débrancher le tuyau du contrôleur (15), puis vider complètement la glace et l'eau du contrôleur.

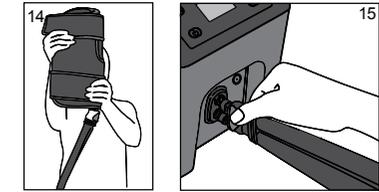

- i. Connecter l'embout purgeur à l'enveloppe (16) et laisser s'écouler l'eau (17). Retirer l'embout purgeur et le ranger dans le sac.

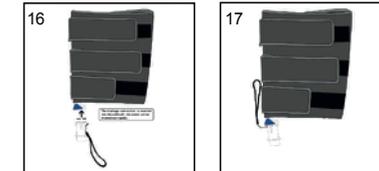

Indications

Le contrôleur CRYO NOV est conçu pour vous aider dans votre récupération par le flux intermittent d'eau froide dans une enveloppe adaptée. Idéal après une séance de sport !

Contre-indications

1. Femmes enceintes, patients souffrant d'hypertension, de diabète ou de troubles circulatoires : consulter votre médecin avant toute utilisation.
2. Ne pas utiliser sur une plaie ouverte.
3. Ne pas utiliser en cas d'intolérance au froid.
4. Ce produit est fortement déconseillé aux personnes atteintes de maladie(s) vasculaire(s).